

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt gekauft haben. Um dieses Produkt vor Gebrauch besser zu verstehen lesen Sie bitte dieses Handbuch und achten dabei besonders auf **Vorsicht*** Hinweise zum korrekten Betrieb und Gebrauch. Der öffentliche Bereich behält sich das Recht vor, das Produktdesign zu ändern. Das Produktdesign kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden, das Unternehmen behält sich das Recht zur endgültigen Auslegung vor.

ERINNERUNG

1. Das Produkt, die Benutzung des Produktes und die elektronischen Komponenten hat im Falle von nicht-menschlichem Schaden und Fehler eine Garantie von einem Jahr.
2. Von Menschen verursachter Schaden fällt nicht unter die Gewährleistung. Unabwendbarer Schaden fällt nicht unter die Gewährleistung.
3. Die Produktgarantie für den Kunden basiert auf dem Datum der Lieferungsgarantiekarte.

INHALT

Sicherheitsvorkehrungen.....	1
Teile name und funktion.....	2
Darstellung struktur.....	3
Steuerteil.....	3
Produktbesonderheiten, funktionen, Auswirkungen auf die Gesundheit.....	4
Lagerung und wartung.....	5
Fehlerbehebung.....	6
Technische produkt parameter.....	7

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Sicherheitsvorkehrungen

- ▶ Vor dem Gebrauch lesen Sie sich bitte die "SICHERHEITSVORKEHRUNGEN" sorgfältig durch um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
- ▶ Die folgenden "SICHERHEITSVORKEHRUNGEN" sind für den richtigen Gebrauch des Massagesessel von großer Hilfe.
- ▶ Um den Gefahren- und Schadensgrad durch unsachgemäßen Gebrauch eindeutig zu kennzeichnen, sind die Unfallkategorien in "WARNUNG" und "VORSICHT" unterteilt. Anweisungen die so gekennzeichnet sind, sollten unbedingt befolgt werden:

 WARNUNG	Unsachgemäße Bedienung kann zu Verletzungen führen.
 VORSICHT	Unsachgemäße Bedienung kann zu Verletzungen führen oder Schäden am Produkt hervorrufen.

	Verboten. Besondere Anweisungen werden in der Abbildung angegeben. (Zum Beispiel, die linke Zeichnung bedeutet, dass eine Demontage nicht zulässig ist.)
	Bestimmte vorgeschriebene Anweisungen werden in der Abbildung angegeben. (Zum Beispiel, die linke Zeichnung bedeutet, dass der Netzstecker gezogen werden soll.)

WARNUNG

 OBLIGATORISCH	Es wird empfohlen, dass diejenigen, die eine der folgenden gesundheitlichen Probleme haben, vor der Nutzung einen Arzt konsultieren sollten. 1. Diejenigen, die elektronische medizinische Instrumente in ihrem Körper tragen, wie zum Beispiel einen Herzschrittmacher usw 2. Diejenigen, die sich zur Zeit in ärztlicher Behandlung befinden, besonders diejenigen, die sich unwohl fühlen. 3. Diejenigen, die Malignompatienten sind, Patienten mit Herzkrankheiten, akute Patienten. 4. Frauen während der Schwangerschaft oder Menstruation. 5. Menschen mit Osteoporose oder Fraktur der Wirbelsäule. 6. Menschen mit Hautkrankheiten oder deren Haut verletzt ist. 7. Menschen deren Körpertemperatur über 38 Grad beträgt (Fieber).
 VERBOTEN	Geistig Behinderten ist die Nutzung des Stuhles verboten wenn sie alleine sind. (Es ist erlaubt unter Aufsicht) Kindern ist das Spielen auf dem Massagesessel verboten. Lassen Sie nicht mehr als jeweils eine Person diesen Massagesessel benutzen. Wenn das Netzkabel oder Netzteil in irgendeiner Weise beschädigt sind, müssen sie sofort vom Stromnetz getrennt werden und Sie sollten sich an einen autorisierten Servicetechniker wenden zwecks Reparatur oder Ersatz. Das Netzkabel darf nicht beschädigt, bearbeitet, übermäßig gebogen, auseinandergezogen oder verknotet werden. Jugendlichen ist es verboten dieses Produkt zu benutzen.
 KEINE DEMONTAGE	Außer dem von unserer Firma bestimmten Wartungspersonal, darf niemand den Massagesessel auseinandernehmen, warten oder umgestalten. Bei irgendwelchen Problemen kontaktieren Sie bitte den örtlichen Händler.


SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

VORSICHT


 OBLIGATORISCH	◆ Benutzen Sie den Massagesessel nie länger als 20 Minuten und beschränken Sie sich auf 5 Minuten bei der Massage von bestimmten Körperteilen. ◆ Bitte stellen Sie den Massagesessel auf flachen Boden für die Nutzung. ◆ Bitte üben Sie keinen übermäßigen Druck aus, wenn Sie die Beinstütze oder Rückenlehne verstellen; darüber hinaus sollten Sie Kinder und Haustiere entfernt halten. ◆ Bitte ziehen Sie den Stecker heraus indem Sie den Stecker halten und nicht das Netzkabel. ◆ Bitte verwenden Sie kein Netzteil, dass über die angegebene elektrische Spannung hinaus geht, da dies zu einer Feuerkatastrophe führen oder dem Massagesessel Schaden zufügen könnte. ◆ Vor der Nutzung entfernen Sie bitte das Rückenkissen um zu prüfen, ob die Rückenlehne oder der Stoff beschädigt sind; Bei Beschädigung sollten Sie die Nutzung des Massagesessel sofort einstellen und den Franchisegeber umgehend zwecks Reparatur kontaktieren. ◆ Bitte bedienen Sie den Regler nicht mit feuchten Händen und platzieren Sie keine schweren Gegenstände auf den Regler. ◆ Nur Menschen mit einem Gewicht von weniger als 120 kg dürfen den Massagestuhl benutzen. ◆ Bitte verwenden Sie keine anderen therapeutischen Geräte zusammen mit diesem Massagesessel. ◆ Sollten Sie sich während der Nutzung unwohl fühlen, müssen Sie sofort abbrechen und einen Arzt konsultieren. ◆ Dieser Massagesessel ist nur zum nicht-kommerziellen privaten Hausgebrauch entworfen und bestimmt und darf nicht für medizinische Behandlungen benutzt werden. ◆ Der Massagesessel hat eine Wärmefunktion, deshalb sollten Personen, die gegen Hitze unempfindlich sind, bei dem Gebrauch Vorsicht walten lassen. ◆ Schalten Sie den Strom nach dem Gebrauch und vor dem Reinigen immer sofort ab und entfernen Sie den Netzstecker.
 VERBOTEN	◆ Um Unwohlsein zu vermeiden, benutzen Sie den Massagesessel nie unmittelbar nach dem Essen. ◆ Schlafen Sie nie während der Massage auf dem Massagesessel ein. ◆ Benutzen Sie den Massagesessel nie wenn Sie betrunken sind oder sich nicht wohl fühlen. ◆ Wenn die Polsterung verschmutzt ist, sollten Sie nur bekannte Lederreiniger von guter Qualität verwenden. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Benzin oder Waschmittel usw und sprühen Sie keine Pestizide drauf. ◆ Setzen Sie sich nicht auf die Rückenlehne, Beinstütze oder Armlehne um Unfallverletzungen oder Motorschaden zu vermeiden. ◆ Bitte rauchen Sie während der Benutzung des Massagesessel nicht.
 STECKER ZIEHEN	◆ Vor Beginn der Wartungsarbeiten bitte Netzstecker herausziehen. Darüber hinaus dürfen Sie den Netzstecker nicht mit feuchten Händen einstecken oder ziehen um Stromschläge zu vermeiden. ◆ Wenn der Massagesessel nicht in Gebrauch ist, schalten Sie ihn bitte aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Bei Stromausfall unterbrechen Sie bitte sofort die Stromzufuhr und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

TEILE NAME UND FUNKTION

Darstellung struktur

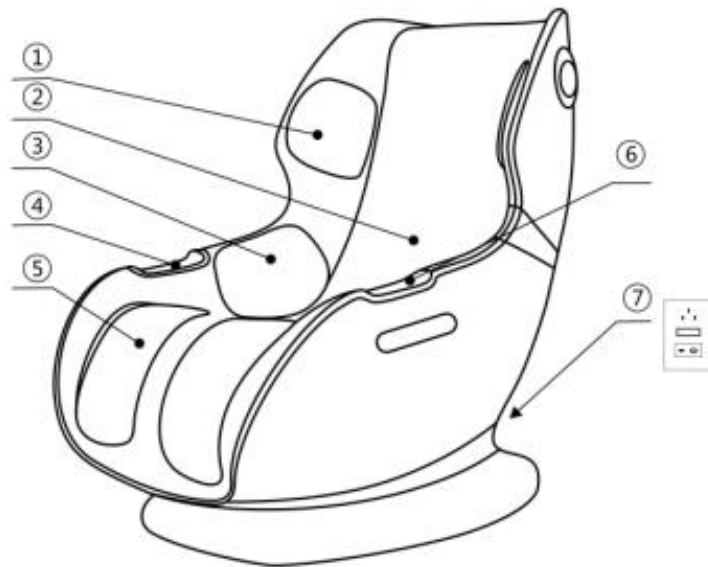

- 1 umhängetasche 2 massagerücken 3 tailleluftkissen 4 bedienfeld
5 beinluftkissen 6 handlaufpanel 7 stromschalter / sicherung / steckdose

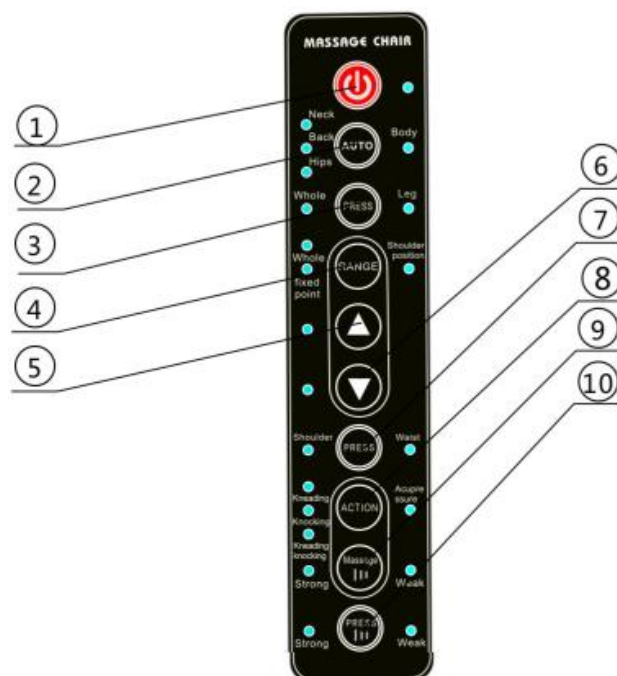

Steuerteil

1. Ein-/Ausschalten
2. Automatik-Modus-Auswahl
3. Luftdruckmassage
4. Massage Bereichsanpassung
5. Schalter für Hochregulierung
6. Schalter für Abwärtskorrektur
7. Luftdruckmassage
8. Wahl der Massagetechnik
9. Massage-Intensität-Anpassung
10. Luftdruckmassage

TEILE NAME UND FUNKTION

Schalter	Beschreibung der Funktion
	1 Öffnen / schließen Massagestuhl Massagefunktion
	2 Zyklus / Hals / Körper Rücken Taille / Hüfte Massagefunktion
	3 Zyklus an/aus der Körper- und Beindruckmassage
	4 Kreisförmige Auswahl Voll-/ Fixpunktmassage / Schulterpositionsanpassung
	5 Schulterposition und festen Modus einstellen
	6 Schulterposition und fester Modus abwärts Einstellung
	7 Zyklus ein/aus der Schulter-/Taillendruckmassage
	8 die Auswahl der Massagetechnik im ganzen Kurs / Fixpunktmodus
	9 mechanische Handmassage Massageintensität
	10 Intensität der Druckmassage

Produktbesonderheiten, Funktionen und Gesundheitsvorsorge

Produktbesonderheiten und Funktionen

- 1 Das allgemeine Erscheinungsbild bietet ein schönes Design, modische Farben, menschliches Strukturdesign, komfortablen Massagegenuss
- 2 unter Verwendung von 3D fortschrittlicher Handmassagensimulation, kneten, klopfen, tappen, Shiatsu, kneten und klopfen Eine Vielzahl von Massagetechniken
- 3 ultra-leises intelligentes Massagemanipulatordesign
- 4 einfaches und benutzerfreundliches Bedienfeld, einfach zu bedienen, einfach zu benutzen
- 5 Beinluftkissenmassage, entspannt Muskeln gleichzeitig, beschleunigt die Durchblutung
- 6 Auswahl an grünen Umweltschutz

Gesundheitsvorsorge

1. Lindert Müdigkeit, Verbesserung der Schlafqualität, Entspannung
2. Verbessern die Durchblutung, verbessert den Körper
3. Lindert Muskelermüdung, erhöht die Muskelkraft
4. Entspannen Sie Ihre Muskulatur und verbessern Sie die Immunität des Körpers.
5. Lindert Nerven- und Muskelschmerzen
6. Lindert das Taubheitsgefühl der Gliedmaßen, stärkt die Abwehrkräfte

LAGERUNG UND WARTUNG

Wartung

- ▶ Bitte drücken Sie das Baumwolltuch, welches in neutralem Reinigungsmittel getränkt ist, aus bevor Sie die rückseitige Abdeckung, Handauflage, Beinstütze, Luftschlauch und einige andere Kunststoffteile abwischen, dann verwenden Sie ein trockenes Baumwolltuch um diese noch einmal abzuwischen.
- ▶ Verwenden Sie ein trockenes Tuch um den Regler, DVD und Spannungsversorgungsbox abzuwischen.
- ▶ Verwenden Sie ein Stück Stoff, dass in ein neutrales Reinigungsmittel getaucht wurde um das Rückenkissen und Kopfkissen zu wischen, dann ein nasses Tuch zum Wischen und schließlich legen Sie sie an einen gut belüfteten Ort damit sie natürlich trocknen können.



VORSICHT

- ▶ Achten Sie darauf, zuerst den Netzstecker vor Beginn der Wartungsarbeiten zu ziehen. Ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen aus der Steckdose um einen Stromschlag zu vermeiden. Wenn Sie die Rückseite reinigen, achten Sie darauf dass kein Reinigungsmittel in die Spannungsversorgungsbox gelangt.
- ▶ Bügeln Sie die Polsterung nicht.

Lagerung

- ▶ Wischen Sie nach dem Gebrauch den Staub und Dreck ab, wenn das Produkt eine längere Zeit nicht benutzt wurde und decken Sie es bitte mit einem Staubschutz ab (selbst bereitgestellt).



VORSICHT

- ▶ Lagern Sie das Produkt nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder an Orten mit erhöhter Temperatur. Dadurch kann die Farbe der Polster verblassen.

Freundliche Erinnerung

Überprüfen Sie das Produkt bitte auf die folgenden Symptome während des täglichen Gebrauchs:

- ▶ Verbrannter Geruch
- ▶ Bei Berührung des Kabels ist das Gerät manchmal an- und manchmal ausgeschaltet.
- ▶ Das Netzkabel ist heiß.
- ▶ Andere ungewöhnliche Symptome



VORSICHT

- ▶ Bitte benutzen Sie den Massagesessel nicht, wenn eins der Symptome vorliegt um Störungen und Unfälle zu vermeiden.
- ▶ Schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker. Danach wenden Sie sich an die lokalen Vertriebspartner oder die Zentrale zwecks Reparatur und Wartung.
- ▶ Abgesehen von dem erwähnten Normalbetrieb und der Wartung, kann jegliche andere Reparaturen und Wartungen ausschließlich von unseren autorisierten Händlern und Dienstleistern ausgeführt werden.

FEHLERBEHEBUNG

Nr.	Problem	Mögliche Ursache	Lösung
1	Der Ton "Xu Xu", "Ta Ta" klingt an.	Dies ist der normale Ton der vom Motor erklingt oder der Ton der produziert wird, denn der Massageball gegen die Stoffabdeckung gerieben wird.	Dies ist normal und es besteht kein Handlungsbedarf.
2	Das Gerät kann nicht gestartet werden.	Der Netzstecker ist gelöst.	Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.
		Der Netzschalter ist nicht eingeschaltet.	Betätigen Sie den Schalter
		Die Sicherung des Massagesessels ist durchgehauen.	Ersetzen Sie sie mit einer Neuen mit der gleichen Stärke.
3	Das Luftkissen, das im Sitzkissen oder Beinstütze eingebaut ist, kann nicht funktionieren.	Überprüfen Sie, ob der Luftschlauch blockiert ist.	Den Luftschlauch freimachen.

Wenn ungewöhnlich Erscheinungen weiterhin bestehen bleiben nachdem oben genannte Maßnahmen durchgeführt wurden, kontaktieren Sie bitte den örtlichen Vertriebspartner zwecks Reparatur und Wartung.

Hinweis: Nehmen Sie das Produkt nicht selbst auseinander, da unser Unternehmen keinerlei Verantwortung für jeglichen Schaden, den Sie dem Produkt oder Verletzungen, die Sie sich zufügen, übernehmen wird. Danke für Ihre Zusammenarbeit.

TECHNISCHE PRODUKT PARAMETER

Produktname: Intelligenter Freizeitmassagestuhl

Produktmodell: JM-B8099EF

Nennfrequenz: 50/60HZ

Nennspannung: 220V

Nennleistung: 60W

Sicherheitskonzept: I

Umsetzungsstandards: GB1706.1/GB1701.10

Verpackungsgröße: 107*70*115 cm

Brutto-Gewicht: 48kg

Nettogewicht: 45kg

Importeur:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany