



700-124V80 700-124V90

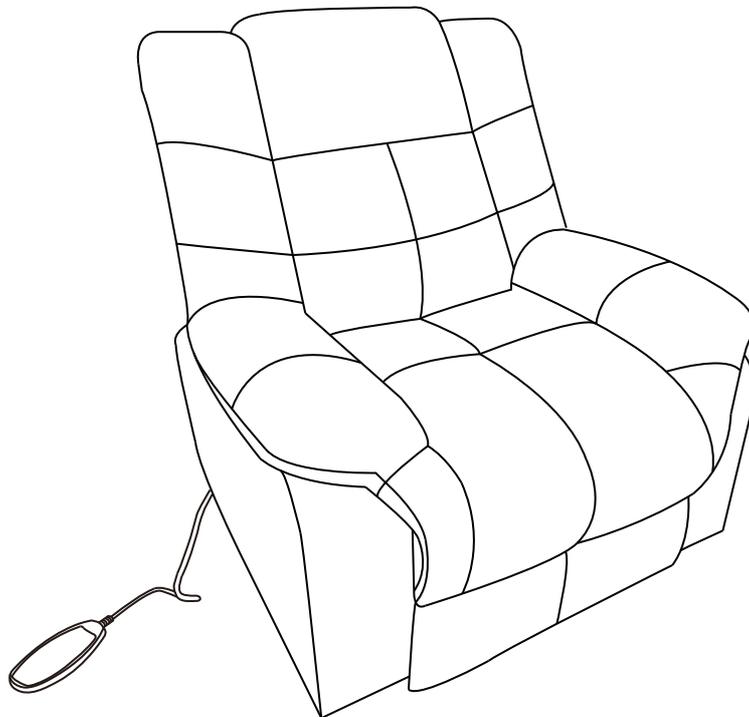

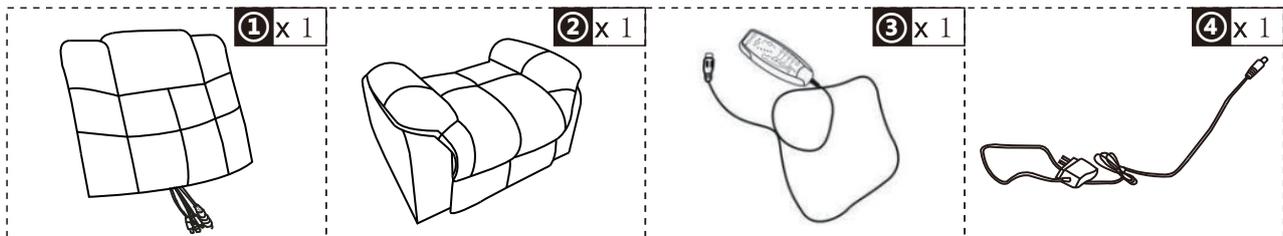


① x 1

② x 1


③ x 1

④ x 1


01

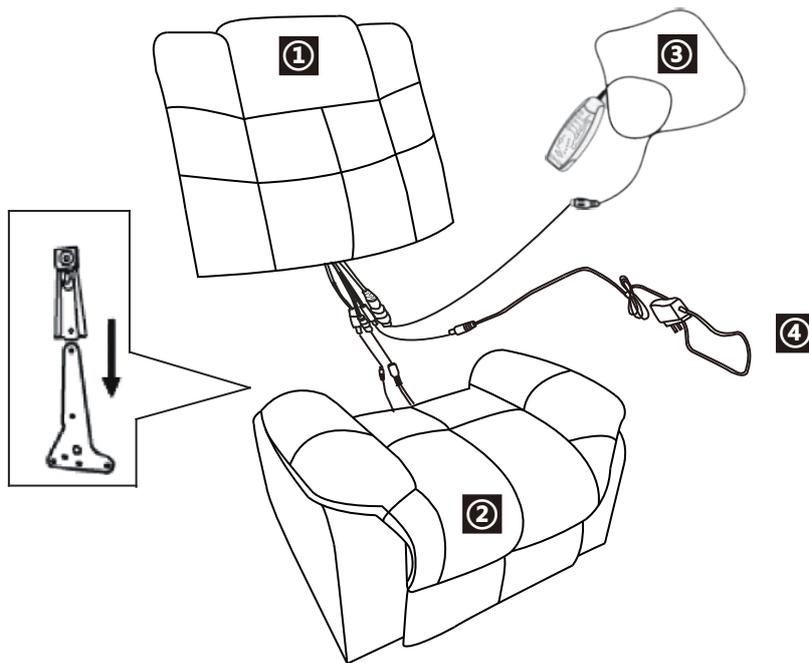

02

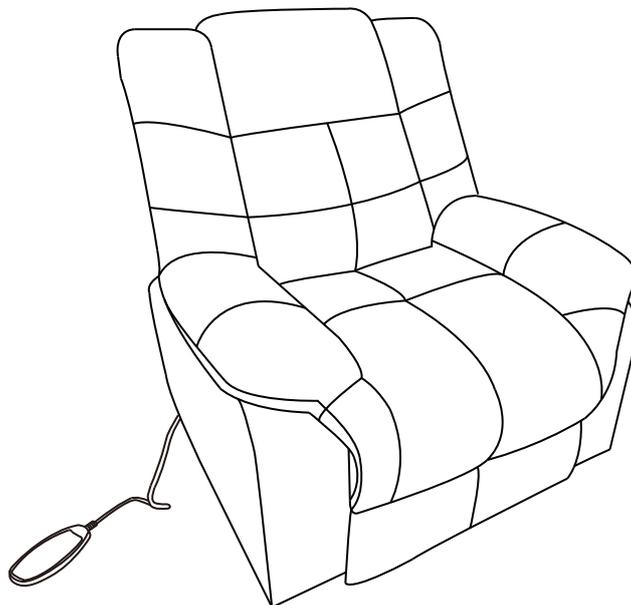

Description fonctionnelle du masseur

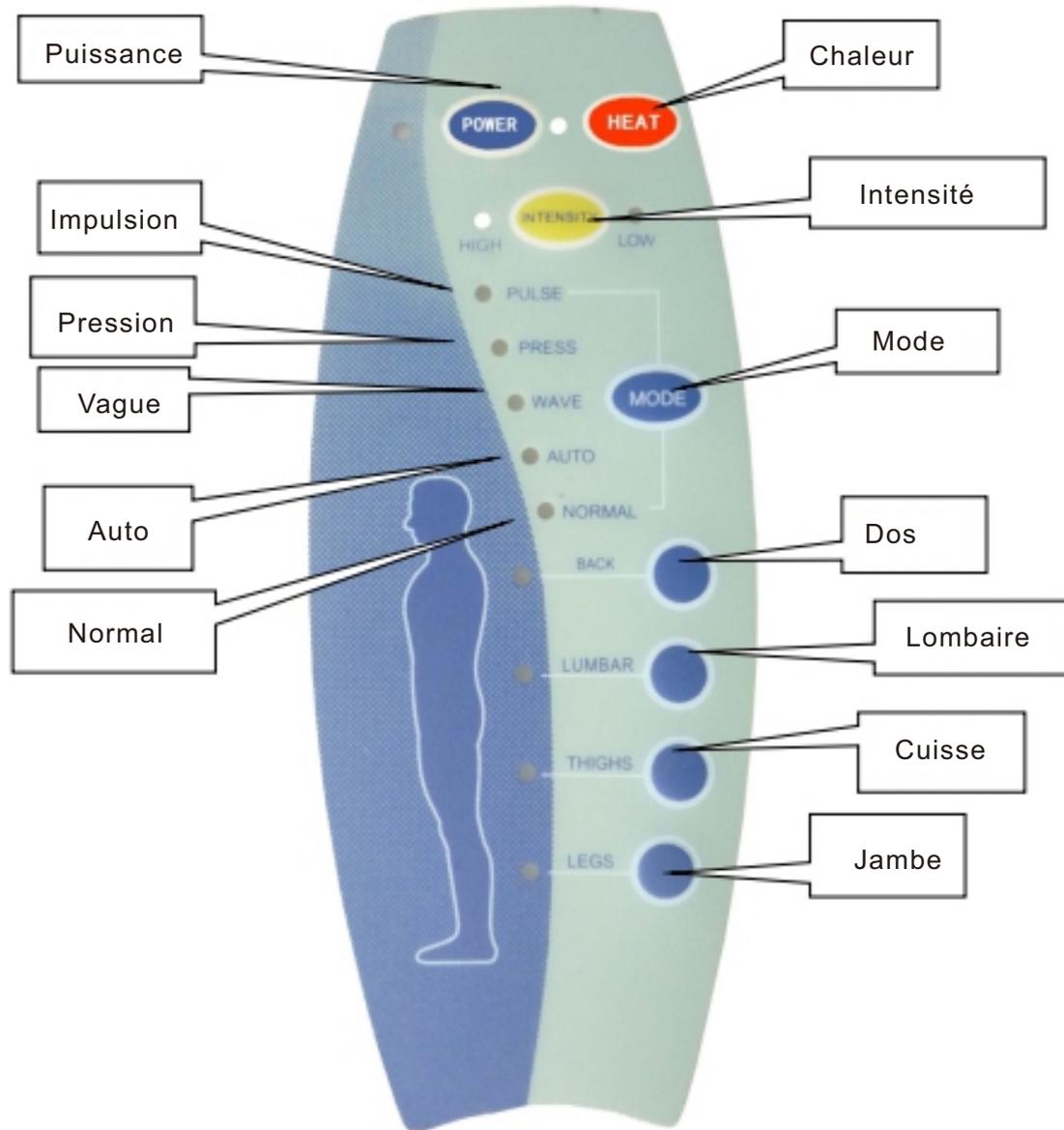

Ce masseur est en 8 points, composé d'une carte de commande manuelle, d'un fil machine et d'un moteur. Il est disponible en 5 modes fonctionnels et est fourni avec une fonction manuelle / automatique, la chaleur et une fonction de contrôle fort / faible.

I. Spécifications du masseur

1. La tension d'entrée requise du masseur est de 220V, 50Hz.
2. La tension de sortie requise du masseur est DC12V, 1,2A.

II. Présentation graphique du contrôleur

1. PUISSANCE: allumer / éteindre la touche de sélection
2. CHALEUR: touche marche / arrêt du chauffage
3. INTENSITÉ: touche de sélection forte / faible.
4. MODE: touche de sélection du mode de travail
5. DOS: touche de sélection de la fonction de massage du dos
6. LOMBAIRE: touche de sélection de la fonction de massage lombaire
7. CUISSE: touche de sélection de la fonction de massage des cuisses
8. JAMBE: touche de sélection de la fonction de massage des jambes

III. Mode d'emploi

1. Insérez l'alimentation dans la prise DC
2. Appuyez sur la touche PUISSANCE pour démarrer l'unité, lorsque l'unité entrera dans le premier mode pour fonctionner pendant 15 minutes à l'étape moyenne, avec tous les indicateurs correspondants allumés.
3. Appuyez sur CHALEUR pour activer la fonction de chauffage.
4. Appuyez sur la touche FUNCTION pour sélectionner différents modes de fonctionnement (IMPULSION, PRESSION, VAGUE, AUTO, NORMAL)
5. Appuyez sur la touche INTENSITÉ pour sélectionner l'intensité de vibration haute et basse.
6. Appuyez sur la touche DOS, LOMBAIRE et CUISSE pour masser les différents endroits du corps

US



001-877-644-9366
customerservice@aosom.com

CA



001-855-537-6088
customerservice@aosom.ca

UK



0044-800-240-4004
enquiries@mhstar.co.uk

DE



0049-(0)40-88307530
service@aosom.de

FR



0033-1-84166106
contact@aosom.fr

ES



0034-931294512
atencioncliente@aosom.es

IT



0039-0249471447
clienti@aosom.it