



GESUNDHEIT & SCHÖNHEIT

Fußmassagegerät

700-061RD/700-061BK/700-062RD/700-062BK

[Interne Daten]



Intelligenter Roboterarm

Dreidimensionale biomimetische Massage

Bedienungsanleitung für Fußmassagegerät

INHALT

Fußmassage zu Hause	3
Produkttheorie der Fußmassage	4
Produkteigenschaft des Fuß Massagegeräts	5
Anwendungsbereich	5
Produktwert	6
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN	6
Häufige Krankheiten und Fußphysiatrie für	8
Sub-Gesundheitssymptome	
Übersicht	15
Vorgehensweise und Beschreibung der	15
Bedienungsknöpfe	
Betriebsanweisung	16
Hinweise	17
Wichtige technische Parameter	18
Reinigung und Wartung	18
Kundendienst	18
Verpackung und Zubehör	19
Anhang: Fußreflexzonenmassage Diagramm	

Fußmassage zu Hause

Fußtherapie zur Gesundheitsfürsorge zu Hause

Heutzutage wird Fußreflexzonenmassage immer beliebter in der Gesundheitsfürsorge. Die chinesische Medizin hat den Glauben, dass die inneren Organe mit den Beinen in Verbindung stehen, vorangetrieben. Das menschliche Fußgelenk allein hat mehr als 60 Punkte und die Fußpflege an diesen Punkten fördert die Durchblutung und wärmt die Organe. Eine Fußbehandlung vor dem Zubettgehen, kann dazu beitragen, Müdigkeit zu lindern, die Nerven zu beruhigen und einen gesunden Schlaf fördern.


Befürwortung der häuslichen Fußpflege

Die häusliche Fußpflege ist leicht zu erlernen und ermöglicht Flexibilität. Vergessen Sie nicht welche Rolle Ihre Füße spielen und behandeln Sie sie entsprechend.

Produkttheorie des Fuß Massagegeräts

Reflexzonenmassage basiert auf traditioneller Medizin, Meridianlehre, magnetische Wissenschaft und dem Gesundheitsgesetz der Reflexzonenmassage. Es ist eine Zusammenführung von modernen elektronischen Verfahrenstechniken und medizinischen Forschungsleistungen.

Grundsätze des neuralen Reflexes

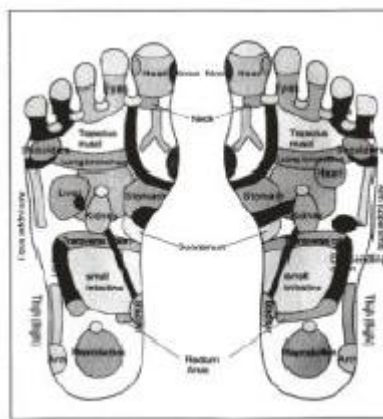

Der Reflex ist eine menschliche Reaktion auf äußere Reize. Abnormes Körpergewebe und Organe führen zu Fußproblemen an den Reflexpunkten - Luftblasen, Sandkörner, stabförmige Blockierungen, kleine Knötchen, etc. Wenn Sie diese Reflexpunkte massieren, spüren Sie eine Druckempfindlichkeit. Der Schmerz geht vom betroffenen Nerv zum zentralen Nervensystem und sendet eine Reihe von Nervenimpulsen in das Körpergewebe und in Organe. Dies führt zur humeralen Regulierung und erhöht das Potential des Körpers die Ungleichgewichte im Körper anzusprechen.

Jingluo ist die wichtigste Theorie der chinesischen Medizin.

Es stammt aus den fünf tausend Jahre alten Aufzeichnungen des „Inner Canon of the Yellow Emperor“ (Buch des gelben Kaisers zur inneren Medizin). Meridian ist eine „Energiebahn“ und kann, wenn blockiert, dazu führen, dass man sich unwohl fühlt. Die Meridianlinie verbindet die Reflexpunkte des Füße und stimuliert den Kreislauf, wenn sie massiert werden.

Produktmerkmale des Fußmassagegerätes

1. Vollmassage, betont wichtige Punkte
2. Beidfüßige Massage für gleichzeitige Massage von Punktepaaren.
3. „Symptomatische Akupunkturpunkte“ ermöglichen eine personalisierte Fußmassage.
4. Bequem zu bedienen.
5. Die einzigartige konvex-konkave Form und das Design sorgen für die perfekte Übereinstimmung mit der menschlichen Fußform und folgen den Akupunkturpunkten.
6. Die Mikro-Computer-Steuer (nur 200W) ist energieeffizient (nur 0.1 Grad Verbrauch), zuverlässig und langlebig.
7. Kann jederzeit den persönlichen Geschwindigkeits- und Richtungsvorlieben angepasst werden.

Geltungsbereich

1. Gesundheitsfördernde Massage für zu Hause und Freizeit zur Linderung von Müdigkeit.
2. Rehabilitationsbehandlung für Erkrankungen wie Kopfschmerzen, Migräne, Hals- und Schulterschmerzen, Magenschmerzen, Müdigkeit, unregelmäßiger Blutdruck, Verstopfung, Gewichtsabnahme, Entgiftung, Mangel an Schlaf, Schlaflosigkeit, Erkältung, Druck, Dysmenorrhoe, Wechseljahre, unregelmäßige Menstruation, Unfruchtbarkeit, etc.

Produktwert

1. Erleben Sie eine humanisierte 3-D biomimetische Fußmassage.
2. Wirtschaftliche Vorteile: 5 Minuten für Reflexzonenmassage (200 Watt, eine halbe Stunde pro Tag, 5 Minuten Strom).
3. Eine Selbstmassage der Füße verbessert die Lebensqualität, stärkt den Körper.
4. Niedriger Einsatz und hohe Gegenleistung. Beidfüßige Massage für gleichzeitige Massage von Punktpaaren, zwei Kanäle doppelte Stärke.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Wann sollte ich das Fußmassagegerät nicht verwenden?
Sie sollten Ihre Füße 30 Minuten vor einer Mahlzeit und 1 Stunde nach einer Mahlzeit nicht massieren. Eine Fußbehandlung vor oder nach Mahlzeiten behindert die Verdauung.2. Wie lange sollte eine Fußmassage dauern?
Es wird empfohlen, dass eine Fußmassage 30 Minuten dauert. | <ol style="list-style-type: none">3. Was sollte ich nach der Fußmassage machen?
Sie sollten innerhalb von 30 Minuten nach der Massage eine Tasse warmes Wasser trinken, um den Fluss von natürlicher Energie und Blut zu fördern. Vermeiden Sie Tee, Wein und andere Getränke.4. Was sind die Vorteile für die Schönheit?
Fußmassagen regen indirekt die Nebennieren und Hormonausschüttung an. Dies wiederum erhöht die Vitalität der Haut, beschleunigt den Stoffwechsel und reduziert Pigmentierung. |
|---|--|

Was sind die Ergebnisse des Fuß Massagegerät?

Nach 5 - 10 Behandlungen sollte im menschliche Körper folgendes passieren:

1. Besserer Schlaf. Schlafen ermöglicht Körpervernüchterung.
2. Vermehrtes Schwitzen. Schwitzen fördert die Absonderung von Giftstoffen und steigert die Stoffwechselprozesse.
3. Ein Reifewachstum.
4. Erhöhte Stuhlfrequenz zur Absonderung von Giftstoffen und Krankheiten, die durch schlechte natürliche Energie und Blut entstehen.
5. Rücken- und Schulterschmerzen können in den ersten Tagen etwas schlimmer werden, dies verbessert sich jedoch quadratisch als Reaktion auf die erhöhte Blutzirkulation.
6. Bei einigen Patienten könnten Schwellungen auftreten, besonders wenn Sie an lymphatischen Erkrankungen leiden. Massieren Sie weiter, bis die Körperflüssigkeiten im Fluss sind und die Schwellung wird auf natürliche Weise verschwinden.
7. Hitzeerscheinungen durch massieren der Lymphknoten.
8. Reflexreaktion auf Druck. Fern oder gesteigerte Organveränderungen in den ersten Tagen. Bei weiterer Massage werden diese Beschwerden von alleine wieder verschwinden.

Häufige Krankheiten und Fußtherapie

Kopfschmerzen/Migräne

Massieren Sie den schattierten Bereich um Kopfschmerzen zu lindern.



Schmerzende Schultern

Das Massieren dieser Bereiche verbessert die Durchblutung und lindert schmerzende Schultern.



Zervikale Säure

Das Massieren dieser Bereiche reduziert Hals- und Schulterschmerzen. Es kann einen steifen Hals behandeln.



Magenschmerzen

Das Massieren der schattierten Bereiche lindert Magenschmerzen, Erbrechen und Gastritis.



Müdigkeit

Diese Bereiche werden den neuralen Reflex und das endokrine System regeln und die Durchblutung verbessern um Muskelverspannungen und Müdigkeit zu lindern.



Blutdruckkorrekturpunkt

Unregelmäßiger/hoher Blutdruck

Dieser Bereich regelt den Blutdruck, erhöht niedrigen Blutdruck und senkt hohen Blutdruck.



Verstopfung

Dieser Bereich verbessert die Magenperistaltik und fördert den Stuhlgang.



Abnehmen

Dieser Bereich gehört zum Verdauungssystem und verbessert die Magenregulierung.



Entgiftung

Die meisten Giftstoffe verlassen den Körper durch Ausfluss, Wasserlassen oder Stuhlgang. Das Massieren der schattierten Bereiche verbessert die Entgiftung von Nieren und Blase. Die Innenseite der vorderen Ferse gehört zu den Blasenpunkten und schwillt an bei Blasenleiden. Die seitliche Knöchelvorderseite bezieht sich auf die Lymphknoten des Oberkörpers und der große Zeh stellt die Lymphknoten des Unterkörpers dar.



Schlaflosigkeit/Mangel an Schlaf

Der große Zeh steht für die natürliche Energie und das Blut. Eine Massage lindert Stress, verbessert die Durchblutung und den Schlaf.



Erkältung

Das Massieren der folgenden Bereiche entlastet die Nase, Lungen, Bronchus, Kehlkopf und Atemwegsbereich. Es verbessert die Durchblutung, bringt den Körper ins Gleichgewicht und lindert Erkältungssymptome.



Stress

Übermäßiger Stress führt zu einem harten großen Zeh. Durch Massieren des Zehs wird dieser weich. Das Zentrum des großen Zehs steht für die Hypophyse, die bei Massage die Ausschüttung von Hormonen ausgleicht und Druck und Angst reduziert. Es kann auch dazu beitragen Depression zu kontrollieren und den Geist zu entspannen.



Dysmenorrhoe (Menstruationsschmerzen)

Die Massage bei Dysmenorrhoe sollte am ersten Tag der Menstruation beginnen, damit Frauen einen normalen Eisprung haben können. Massieren Sie die Füße an den schattierten Stellen bis sie sich angenehm und weich fühlen. Der seitliche Knöchel auf der unteren Seite steht für die Verbesserung von Eierstockfunktionen.



Wechseljahre

Diese Bereiche stimulieren die Eierstöcke und Funktionen der Hypophyse und lindern die Wechseljahre.



Menstruation,

Unfruchtbarkeit

Führen Sie eine vollständige Massage um den Mittelpunkt des Sprunggelenks aus.

Das seitliche untere Sprunggelenk steht für die Eierstockpunkte und das mediale untere Sprunggelenk steht für die Gebärmutter.



Bedienungsanleitung für Fußmassagegerät


1. Übersicht

Fußmassage basiert auf traditioneller Medizin, Meridianlehre, magnetischer Wissenschaft und dem Gesundheitsgesetz bezüglich der Reflexzonen und integriert Fortschritte der modernen elektronischen Technik und medizinischen Forschung.

2. Verfahren

1). Drücken Sie den Knopf „Automatische Einstellung“ für das Programm, welches folgendes umfasst (Abbildung 1):

- a) Programm I: Gesundheitsmassage.
- b) Programm II: Massage mit Fokus auf Kopf, Nacken, Lendenwirbelsäule, Schultern, etc.
- c) Programm III: Fokus auf Darm, Leber, Magen etc.
- d) IV-Programm: Fokus auf Beine, reproduktive und Harnsysteme.

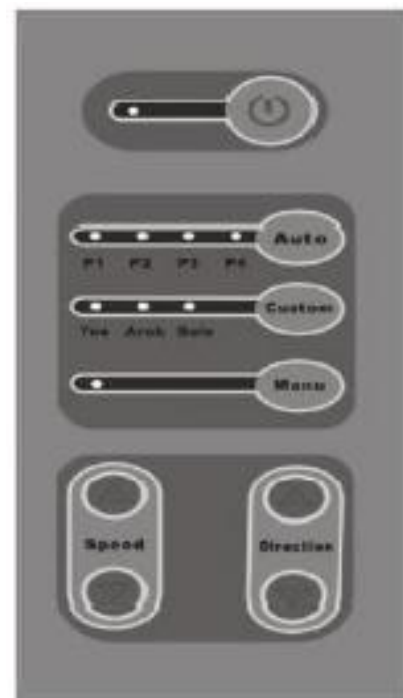

2). Drücken Sie auf „Persönliche Einstellungen“ für ein personalisiertes Programm.

Diese Massage kreist um die Zehen, Fußrücken, Fußsohlen. Drücken Sie auf die ‚hoch‘ und ‚runter‘ Pfeile von ‚Geschwindigkeit‘ (Abbildung 2) um die Geschwindigkeit anzupassen.

3). Drücken Sie auf „Manuelles Programm“ und stellen Sie die Geschwindigkeit („Geschwindigkeit“ ‚hoch‘ und ‚runter‘ Pfeile) und die Richtung („Drehen“ ‚oben‘ und ‚unten‘ Pfeile) ein. (Abbildung 3)

Durch Fernbedienung können alle damit verbundenen Funktionen direkt eingestellt werden. (Abbildung 4)

(Abbildung 4)

Hinweis:

Jeder Massagezyklus ist automatisch auf 15 Minute eingestellt. Wiederholungszyklus für eine 30 minütige Massage.

3. Bedienungsanleitung:

- 1) Stecker ans Stromnetz anschließen
- 2) Drücken Sie zum Anschalten den ‚Knopfschalter‘.
- 3) Massage durch Drücken der gewünschten Einstellung einrichten.
- 4) Gerät ausschalten

Das Massagegerät stellt sich automatisch 5 Minuten nach Ende der Massage aus.

Drücken Sie den ‚Knopfschalter‘ während der Massage um das Gerät anzuhalten. 10 Minuten, nachdem das Gerät angehalten wurde, stellt es sich automatisch ab. Das Massagegerät stellt sich auch ab, wenn Sie den ‚Knopfschalter‘ gedrückt halten.

Hinweis: Ziehen Sie NIE den Stecker aus dem Stromnetz während das Massagegerät in Betrieb ist, ziehen Sie den Stecker nachdem sich das Massagegerät abgestellt hat.


Für Personen, deren Füße empfindlich auf die Massagepunkte reagieren, könnte das Massagegerät anfangs etwas unangenehm sein.

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Füße anfangs etwas höher zu halten, Ihre Füße werden sich dann nach mehreren Anwendungen allmählich an das Massagegerät gewöhnen. Wie sind uns sicher - Sie werden es am Ende lieben.

Vorsicht



1. Sorgen Sie dafür, dass Spannungen kompatibel sind. Ziehen Sie den Stecker mit trockenen Händen - nicht mit nassen Händen raus. Ziehen Sie den Stecker immer raus, wenn das Massagegerät nicht verwendet wird.
2. Verwenden Sie das Massagegerät nicht in Räumen mit schlechter Belüftung, wie zum Beispiel unter der Bettdecke oder durch ein Kissen/Decke abgedeckt. Dies könnte zur Überhitzung führen.
3. Verwendung nur in Innenräumen Nicht im Badezimmer verwenden
4. Setzen Sie sich nicht auf das Massagegerät oder treten zu kräftig darauf.
5. Führen Sie keine Objekte in das Massagegerät.
6. Verwenden Sie das Massagegerät nicht, wenn Kabel beschädigt sind.
7. Verwenden Sie das Massagegerät nicht mit nassen Füßen.
8. Verwenden Sie das Massagegerät nicht, wenn Sie unter folgendem leiden:
Krebspatienten, Osteoporose, hohes Fieber, Bewusstseinsstörungen, erythematöse Epilepsiekranken, bösartigen Tumoren, aktive Tuberkulose, schweren kardialen Dysfunktionen in vivo Patienten mit elektronischen Geräten, Blutungen, schwangere Frauen, allergische Verfassung.
9. Verwenden Sie das Massagegerät nicht zusammen mit den folgenden elektronischen medizinischen Geräten:
 - A) Herzschrittmacher und andere implantierte medizinische elektronische Geräte
 - B) Menschenartige Herz und Lunge (Herz- Lungenmaschine) und andere lebenserhaltende medizinische Ausrüstung.
 - C) EKG Geräte und andere elektronischen Geräte.

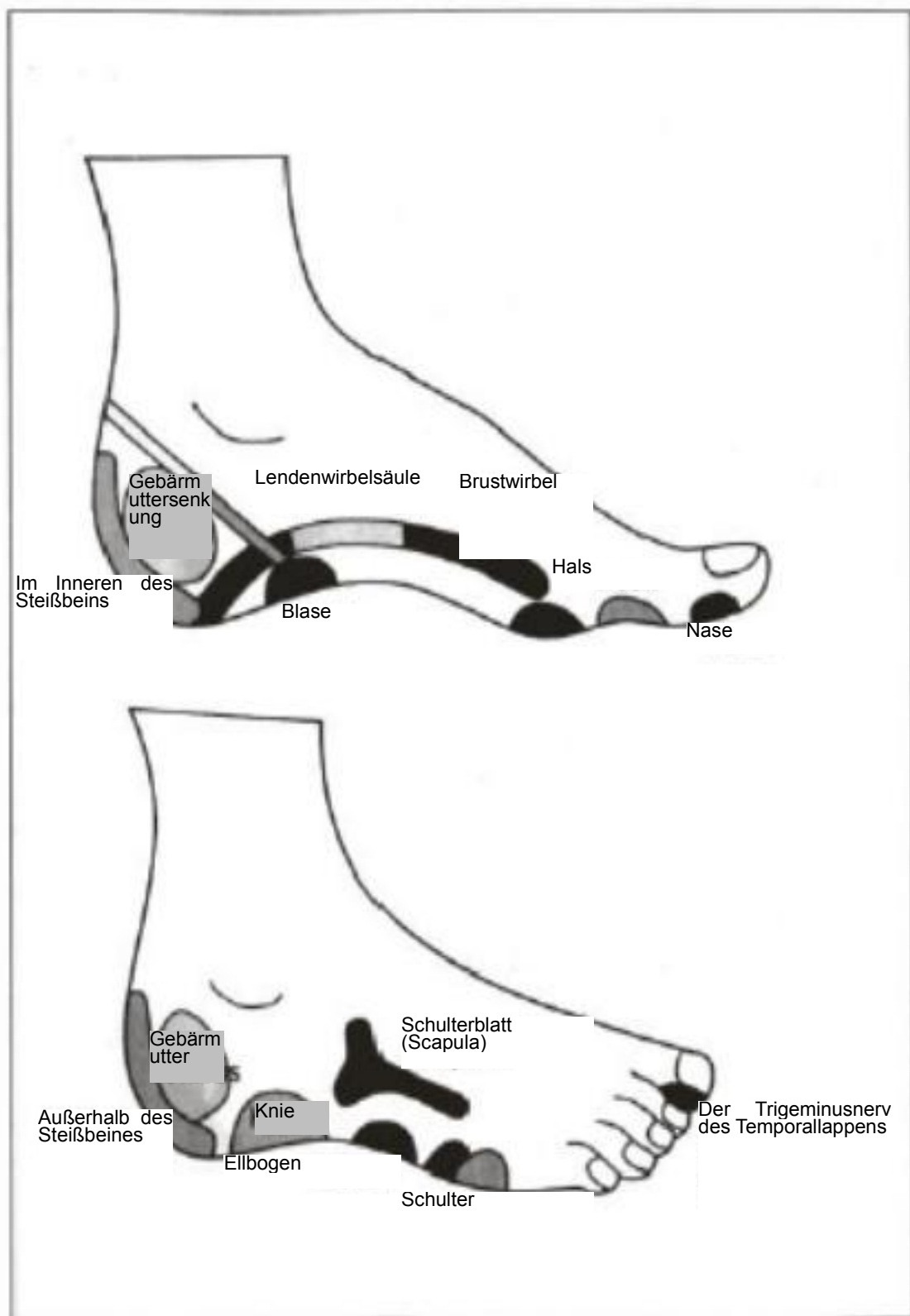



Gedruckt August 2005

Hergestellt in China

Importeur:
MH Handel GmbH
Wendenstraße 309
D-20537 Hamburg
Germany