



Ultimativer Komfort Fuß & Wadenmasseur



Bedienungsanleitung



Spezifikationen

Modellnummer

Netzspannung: DC 24V

Leistung: 80W

Arbeitszyklus: 15 Minuten


Merkmale

1. Dies ist ein völlig neues Massagegerät welches speziell zur gleichzeitigen Massage der Füße und der Waden konzipiert wurde.
2. Das Gerät besitzt vierteilige Massagescheiben zur Massage der Füße und Waden.
3. Flexible Massagescheiben bieten ein professionelles Massageerlebnis.
4. Die Massage dringt tief in die Fuß- und Wadenmuskulatur sowie den Bereich um die Fußgelenke ein.
5. Druckpunkte unter den Füßen stimulieren die Fußreflexzonen.
6. Das Gerät besitzt zwei Massageprogramme sowie drei Vibrationsmodi und kann somit auf persönliche Bedürfnisse eingerichtet werden.
7. Die Synergie von Massage und Vibration schenkt Ihnen ein revitalisierendes und entspannendes Massageerlebnis und verbindet therapeutische Wirkung durch Reflexzonenmassage mit einem Verjüngungsgefühl.
8. Komfortabel gelagerte Bedienelemente erlauben eine einfache Bedienung.
9. Die automatische Abschaltung erfolgt nach 15- minütiger Benutzung.
10. Abnehmbare Stoffbezüge erlauben eine einfache Reinigung und die Erhaltung eines hygienischen Gerätezustandes.
11. Bei Benutzung der Heizfunktion wird die Blutzirkulation angeregt.

Effektivität


1. Die Massage und Vibration dringt tief in die verschiedenen Schichten der Fuß- und Wadenmuskulatur sowie der Fußgelenke ein und sorgt für ein angenehmes Entspannungsgefühl.
2. Das Gerät massiert und stimuliert die vitalen Punkte Ihrer Fußreflexzonen und erhöht somit therapeutische Effekte.
3. Regt die Blutzirkulation an und wärmt somit die Muskulatur auf.
4. Lindert Verspannungen und reduziert Stress.
5. Lindert effektiv Schmerzen und Ermüdung der Füße.
6. Unterstützt die Kräftigung und somit die Formung der Wadenmuskulatur.

Teile und Funktionen

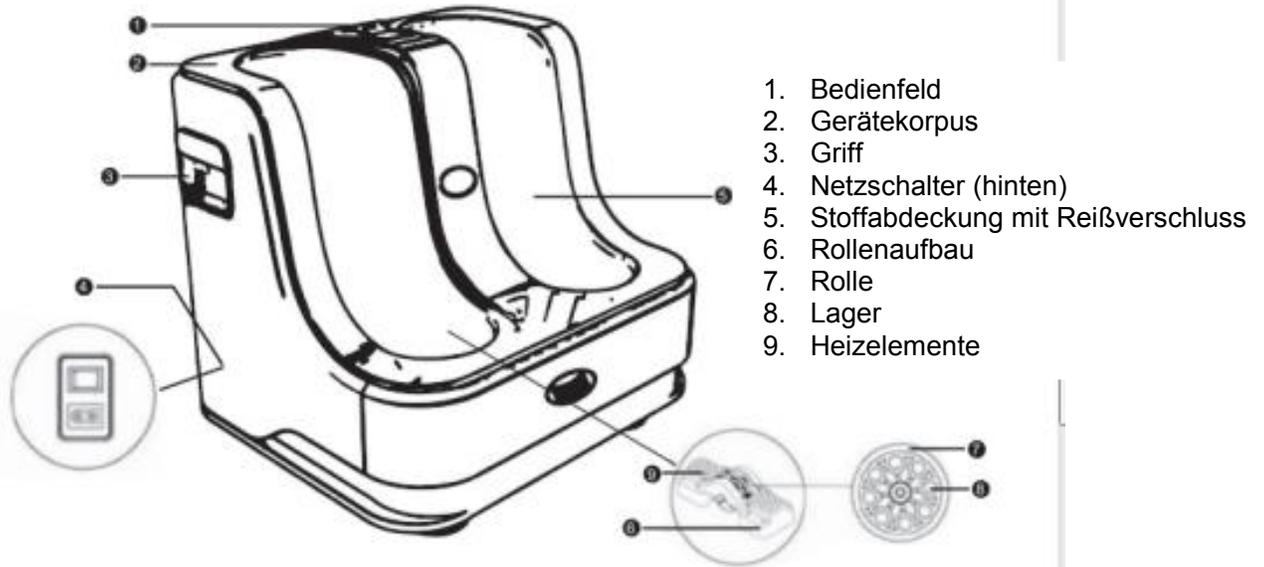

Heizfunktion: Lindern Sie Ermüdung und Schmerzen und regen Sie Ihre Blutzirkulation an.

Die Heizposition befindet sich im Vorfuß. Nach 5-6 Minuten wird es heiß.

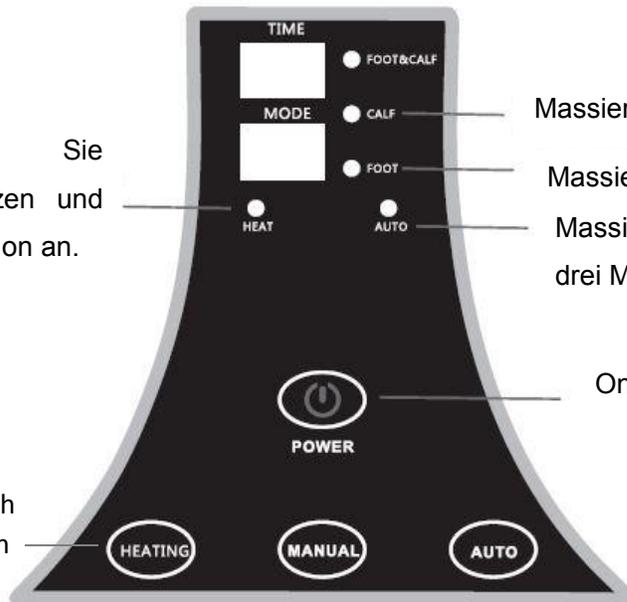

Massiert Ihre Waden in drei Modi.

Massiert Ihre Füße in drei Modi.

Massiert Ihre Füße & Waden in drei Modi.

On/Off Schalter.

Massieren Sie Ihre Füße und Waden in drei Modi.

Achtung

- Stellen Sie sich nicht oder üben Sie Druck auf das Gerät aus. Dies könnte den Motor verlangsamen oder anhalten sowie zur Überhitzung und Beschädigung des Geräts führen.
- Die empfohlene Massagezeit beträgt 15 Minuten.
- Drücken Sie die „Stop“-Taste, wenn Sie Unwohlsein verspüren. Die vierfach- Massagescheiben halten nicht unmittelbar an und führen den Massagevorgang erst vollständig aus, bevor diese sich in den Ruhezustand bewegen.
- Nutzer können während oder nach der Massage ein Kribbeln verspüren, welches durch eine erhöhte Blutzirkulation hervorgerufen wird und somit normal ist.

Sicherheit

Verwendungseinschränkungen

- Benutzen Sie das Gerät nicht in einer nassen oder feuchten Umgebung wie beispielsweise in Badezimmern.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit einem nassen Körper, da dies Kurzschlüsse oder Stromschläge zur Folge haben könnte.

Nutzereinschränkung:

Die folgenden Nutzer sollten einen Arzt vor der Benutzung des Gerätes konsultieren:

- Krebspatienten
- Patienten mit Osteoporose
- Patienten mit bösartigen Tumoren
- Patienten mit hohem Fieber
- Schwangere Frauen

Sicherheitsvorkehrungen während der Benutzung

- Nutzen Sie das Gerät ausschließlich zu Massagezwecken, da ein abweichender Gebrauch Unfälle oder Verletzungen nach sich ziehen könnte.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Stoffüberzug fehlt oder beschädigt ist.
- Vermeiden Sie die Benutzung des Gerätes durch Kinder oder durch Personen, welche das Gerät nicht bedienen können.
- Stellen oder setzen Sie sich nicht auf das Gerät.
- Führen Sie kein brennbares- oder metallisches Material in den Gerätekörper ein. Dies könnte Stromschläge, Kurzschlüsse oder Feuer zur Folge haben.
- Nutzen Sie das Gerät nicht innerhalb einer Stunde nach der letzten Mahlzeit.
- Bedecken Sie das Gerät nicht während des Betriebs. Dies könnte eine Erhöhung der Temperatur des Motors und folglich den Ausfall des Gerätes oder Feuer zur Folge haben.
- Trennen Sie das Gerät nicht vom Stromkreis während der Benutzung.
- Vermeiden Sie das Einschlafen während der Benutzung.

Fälle in denen das Gerät nicht benutzt werden sollte

- Schalten Sie das Gerät in den folgenden Situationen aus und trennen Sie es umgehend vom Stromkreis:
- Wenn Wasser auf dem Gerät verschüttet wurde.
- Falls Sie starke oder ungewöhnliche Schmerzen während des Gebrauchs verspüren, beenden Sie die Massage und konsultieren Sie Ihren Arzt.
- Wenn Sie Fehlfunktionen oder unnatürliche Betriebsabläufe während des Gebrauchs bemerken.
- Bei Stromunterbrechungen kann es möglicherweise zu Verletzungen kommen, falls die Stromzufuhr unvermittelt wieder aufgenommen wird.
- Im Falle von Gewittern.

Wartung und Reparatur

- Das Gerät darf nur durch den Kundendienst des Produzentengewartet oder repariert werden.
- Der Benutzer darf das Gerät nicht selbstständig auseinanderbauen oder reparieren.

Hinweise für Netzteil und Stromkabel

- Prüfen Sie bitte, ob die Netzspannung der Stromversorgung mit der Spannung des Netzteils übereinstimmt.
- Ziehen Sie den Stecker nicht ruckartig aus der Steckdose.
- Verbinden oder Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung nicht mit nassen Händen. Dies könnte zu Stromschlägen und Beschädigungen des Gerätes führen.
- Wenn Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen, ziehen Sie bitte am Stecker und nicht am Kabel.
- Platzieren Sie das Kabel nicht unter dem Gerät oder unter schweren Objekten.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät, da dies zu Beschädigungen des Kabels und möglicherweise zu Feuer oder elektrische Schlägen führen kann.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten oder geflickten Kabel.
- Nutzen Sie nur das mitgelieferte Netzteil sowie die mitgelieferte Ausstattung.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn die Steckdose nicht fest an der Wand befestigt ist.

Produktpflege und Aufbewahrung

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie es reinigen.
- Benutzen Sie kein Benzol, Verdünnung oder andere aggressive Lösungen auf dem Gerät
- Nutzen Sie zur Reinigung einen trockenen Lappen. Reinigen Sie das Gerät und seine Teile nicht mit einem feuchten Lappen
- Aus hygienischen Gründen können Sie den Stoffbezug des Gerätes zur Reinigung abnehmen.
- Sollten Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen ist es ratsam, das Stromkabel aufzuwickeln und das Gerät an einem sauberen und trockenen Platz aufzubewahren.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an einem übermäßig warmen Ort oder in der Nähe von Feuer auf. Vermeiden Sie es, das Gerät für längere Zeit Sonneneinstrahlung auszusetzen.