




IN221100118V01_FR

700-029_700-036

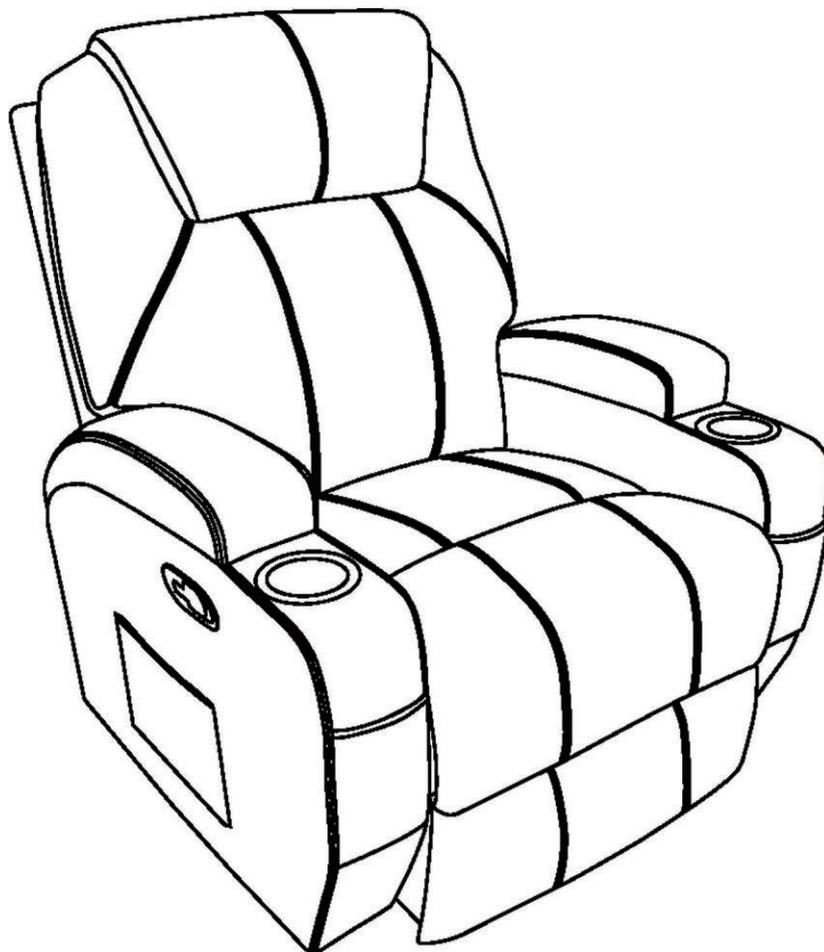

EN_IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

FR_IMPORTANT: A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

ES_IMPORTANTE, LEA Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

PT_IMPORTANTE, RETER PARA REFERÊNCIA FUTURA: LEIA ATENTAMENTE.

DE_WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

IT_IMPORTANTE! CONSERVARE IL PRESENTE MANUALE PER FUTURO RIFERIMENTO E LEGGERLO ATTENTAMENTE.

EN

Dear customer,

Thank you for purchasing this product. So that your appliance serves you well, please read all the instructions in this user's manual. If you have any questions, please contact our customer care center, Our contact details are below:

FR

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Afin que vous puissiez profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire toutes les instructions de ce manuel d'utilisation. Si vous avez la moindre question, veuillez contacter notre centre d'assistance à la clientèle, Nos coordonnées sont les suivantes:

DE

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Damit Ihr Gerät Ihnen gute Dienste leistet, lesen Sie bitte alle Hinweise in diesem Benutzerhandbuch. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum, Unsere Kontaktdaten stehen unten:

ES

Queridos clientes,

Gracias por comprar este producto. Para que su electrodoméstico le sirva mejor, lea todas las instrucciones de este manual del usuario. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente, Nuestros datos de contacto son los siguientes:

PT

Caros clientes,

Obrigado por adquirir este produto. Para que o seu aparelho o sirva melhor, leia todas as instruções deste manual do utilizador. Se tiver alguma dúvida, por favor contacte o nosso Centro de Atendimento ao Cliente, Os nossos dados de contacto são os seguintes:

IT

Caro Cliente,

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Per servirti meglio con questo apparecchio ti prego di leggere tutte le istruzioni in presente manuale utente. In caso di dubbio, si prega di contattare il nostro centro assistenza clienti, I nostri dettagli di contatto sono di seguito:

Country	 Phone	 Email
US	001-877-644-9366	customerservice@aosom.com
CA	416-792-6088	customerservice@aosom.ca
UK	0044-800-240-4004	enquiries@mhstar.co.uk
DE	0049-0(40)-88307530	service@aosom.de
FR	0033-1-84166106	aosom@mhfrance.fr
ES&PT	0034-931294512	atencioncliente@aosom.es
IT	0039-0249471447	clienti@aosom.it

Chaises

IMPORTANT - CONSERVEZ CES INFORMATIONS POUR VOTRE CONSULTATION ULTÉRIEURE: LISEZ ATTENTIVEMENT

Seulement pour usage domestique

Conseils:

- * Placez la chaise de manière stable sur un sol plat.
- * Installez les chaises dans de bonnes conditions (sol plat, sec, etc...)
- * Restez à l'écart des flammes ouvertes.
- * Évitez de surcharger la chaise

Précautions avant l'assemblage:

- * Préparez une zone de montage propre et sèche.
- * Vérifiez que le produit n'est pas endommagé.
- * Vérifiez qu'aucun des morceaux ne manque.

Entretien:

- * Nettoyer avec un tissu doux.
- * Enlevez régulièrement les feuilles et / ou l'eau recueillie sur la toile.
- * Vérifiez la chaise fréquemment.

Conditions de stockage:

- * Le tissu doit être stocké complètement à sec, dans un endroit propre et sec pour éviter les risques de moisissure.

Attention aux risques de pincement ou de coupure lors du montage. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage dû à une mauvaise installation ou aux intempéries.

Model:	RSS1002-144120-W2E	RSS1002-144120-W2E	
Input voltage	100-240	100-240	V
Input AC frequency	50-60	50-60	Hz
Output voltage	12	12	V
Output current	1.2	1.2	A
Output power	14.4	14.4	W
Average active efficiency	85.02	84.98	%
Efficiency at low load (10 %)	76.58	75.32	%
No-load power consumption	0.074	0.099	W

Importateur:
MH FRANCE
12 Avenue Raspail
94250 Gentilly
France
<https://www.aosom.fr>

Fabriqué en Chine

Nous vous remercions d'avoir acheté notre fauteuil de massage. Veuillez lire attentivement ce manuel d'instruction avant de l'utiliser (en particulier les consignes de sécurité) pour pouvoir utiliser ce manuel correctement. Conserver ce manuel à proximité afin de pouvoir vous y reporter au besoin.

Les règles de sécurité	4
Fauteuil élévateur	5
Description fonctionnelle du masseur	6
Zones de massage	7
Caractéristiques principales du fauteuil	8
Instructions de montage	9
Fonction de repos et fermer le fauteuil inclinable	10
Certificates	10
Dépannage	11

LES RÈGLES DE SÉCURITÉ

- Ne placez jamais le fauteuil élévateur dans des endroits humides ou mouillés ou dans des endroits où la poussière peut s'accumuler, car cela pourrait provoquer une panne électrique ou un dysfonctionnement mécanique.
- N'utilisez jamais le fauteuil élévateur à l'intérieur de votre maison si la température de la pièce dépasse 90 ° F.
- Ne placez jamais le fauteuil élévateur près d'une source de chaleur (four, cheminée, fourneau, etc.) ou à la lumière directe du soleil.

Le pas utiliser le fauteuil si:

- Le fauteuil élévateur est mouillé.
- Vos mains sont mouillées.
- Nettoyer le fauteuil uniquement avec un chiffon sec.
- Il est déconseillé d'utiliser la fonction chaleur ou massage plus de 30 minutes et de boire plus de 2 verres d'eau après l'avoir utilisé.

Situations dans lesquelles vous ne devriez pas utiliser le fauteuil élévateur:

Éteignez le système de massage du fauteuil si celui-ci est mouillé ou semble ne pas fonctionner correctement, si une partie de son aile est endommagée ou fonctionne mal, si une partie du fauteuil semble être endommagée ou si le câblage est exposé, si vous sentez indisposé ou ressentez n'importe quelle douleur pendant le massage, ou s'il y a eu une défaillance électrique générale.

Lorsque le système de massage du fauteuil élévateur n'est pas utilisé:

- Assurez-vous qu'il est éteint.
- Débranchez le système de massage du ventilateur de l'alimentation de la prise murale lorsque vous n'allez pas l'utiliser pendant une longue période.
- Conservez le fauteuil dans un endroit propre et sec.

Démontage du fauteuil élévateur:


- Ne retirez pas le dossier du fauteuil élévateur.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer vous-même le fauteuil élévateur.

Manière correcte de manipuler la prise électrique:


- Vérifiez que vous avez la bonne tension.
- Ne forcez jamais sur le câble ou la fiche.
- Ne tirez jamais le câble avec les mains mouillées.
- Lorsque vous retirez la fiche, tenez la fiche elle-même, ne tirez pas sur le câble.
- N'utilisez pas le fauteuil élévateur si le câble ou la fiche sont endommagés.

Fauteuil élévateur:

- 1) Dossier
- 2) Accoudoirs
- 3) Siège
- 4) Repose pieds
- 5) unités de contrôle

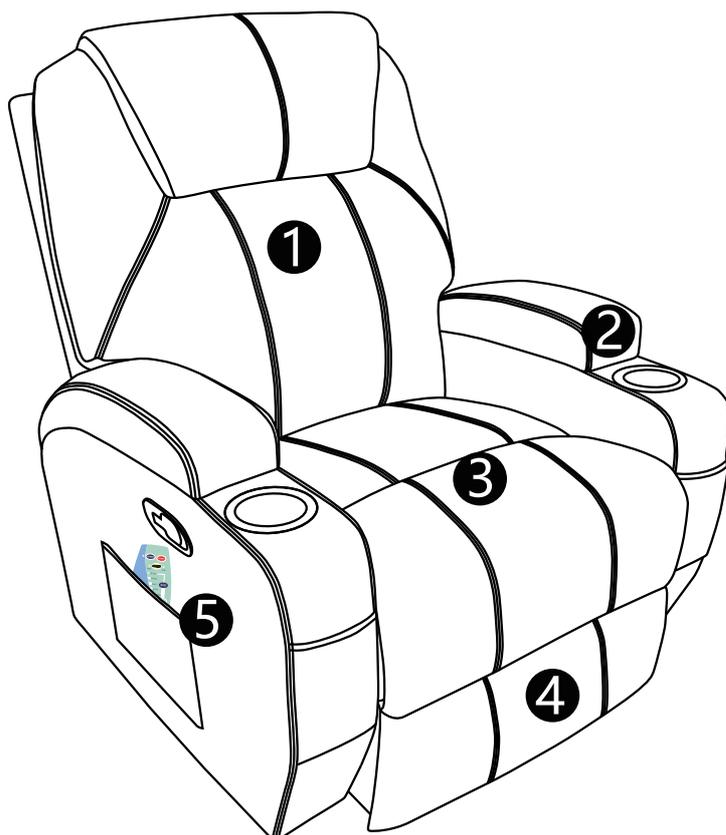

Description fonctionnelle du masseur

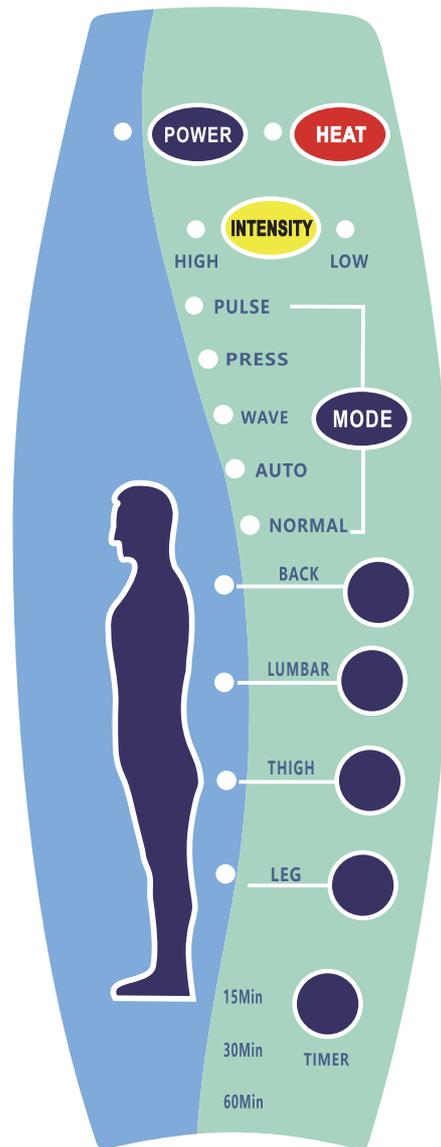

I. Présentation graphique du contrôleur

1. **POWER:** activer / désactiver la touche de sélection
2. **HEAT:** touche marche / arrêt du chauffage
3. **INTENSITY:** High/Low = Intensité Haute/Basse
4. **MODE:** mode de travail
5. **BACK:** massage du dos
6. **LUMBAR:** fonction de massage des lombaires
7. **THIGH:** touche de sélection de fonction de massage de la cuisse
8. **LEG:** touche de sélection de fonction de massage des jambes
9. **TIMER:** régler la clé de temps de travail

II. Mode d'emploi

`Insérez le courant dans la prise DC

`Appuyez sur la touche POWER pour mettre l'appareil en marche, celui-ci entrera alors dans le premier mode et fonctionnera pendant 15 minutes à mi-parcours, avec tous les indicateurs correspondants allumés.

`Appuyez sur la touche HEAT pour sélectionner la fonction de chauffage ON, appuyez à nouveau sur la touche pour désactiver la fonction de chauffage.

`Appuyez sur la touche TIMER, le temps de contrôle de l'appareil changera entre 15min, 30min et 60min.

`Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner différents modes de travail.

(PULSE = Impulsions, PRESS = Pressoir, WAVE = Vague, AUTO = Automatique, NORMAL = Normal)

`Appuyez sur la touche INTENSITY pour sélectionner l'intensité maximale et minimale de la vibration.

`Appuyez sur les touches BACK, LUMBAR et THIGH pour masser les différents endroits du corps.


Zones de massage

`Le fauteuil se compose de deux parties faciles à assembler et à nettoyer.

`Il dispose d'une unité de commande manuelle pour contrôler les fonctions de massage.

-8 points de massage vibrants,
fonction de chauffage dans la région lombaire et 2 niveaux d'intensité.

-9 types de massage différents.

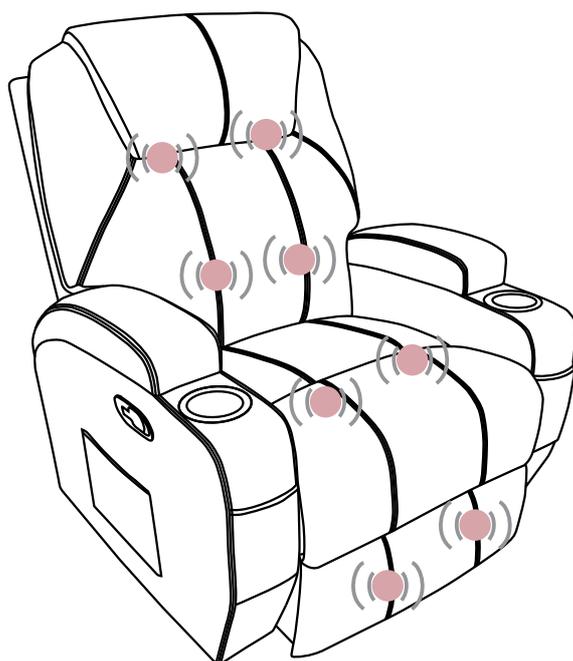

Caractéristiques principales du fauteuil:

1) Composants:

Dossier, siège, accoudoir, repose-pieds, 1 unité de commande et bloc d'alimentation.

2) Fonctions:

`Dossier inclinable, repose-pieds extensible, fonction de chauffage de la région lombaire, fonction de massage et fonction d'élévation.

3)Utilisation:

`À l'intérieur, évitez les températures élevées et les zones humides ou mouillées.

Précaution:

`Ne jamais s'asseoir sur la commande manuelle ou placer des objets lourds dessus

`Ne laissez pas tomber la commande manuelle sur le sol.

`Ne tirez pas sur le câble électrique.

`Ne pas utiliser la commande manuelle avec les doigts mouillés.

`Ne pas appuyer ou toucher les boutons avec des objets pointus.



`Ne débranchez jamais la commande manuelle sans avoir au préalable éteint le courant.

`Le fauteuil de massage doit reposer pendant 30 minutes après avoir été utilisé pendant 30 minutes.


Effets et bienfaits du massage:

`Soulage la fatigue musculaire.

Instructions de montage

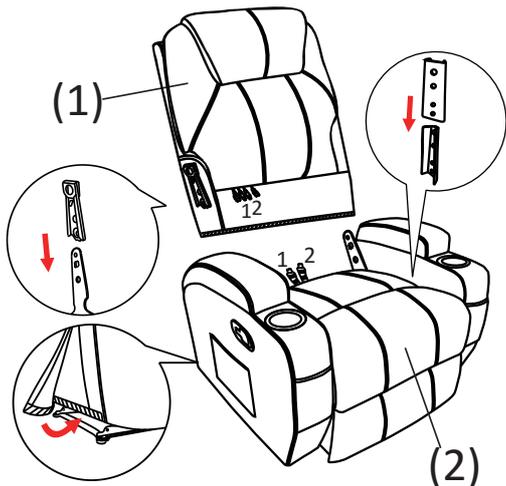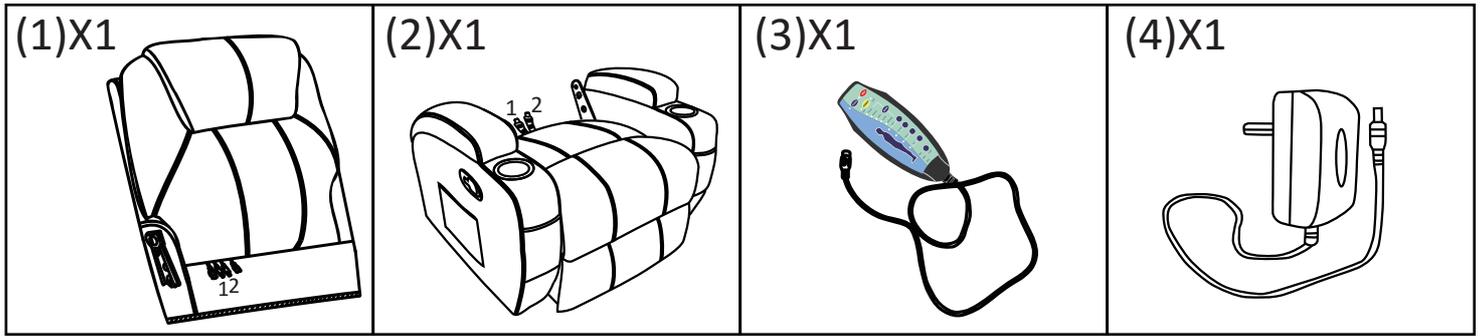


1) Placez le fauteuil en arrière de manière à ce qu'il s'intègre dans le siège, vous entendrez un « clic » quand il sera en place.

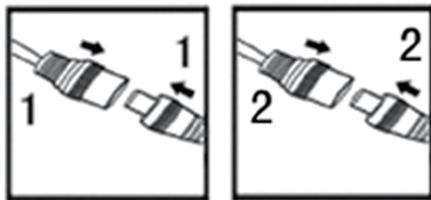


Blanc à Blanc
Rouge à Rouge

2) Connectez les broches du câble d'alimentation du massage et du chauffage. Installez les broches correctement comme indiqué sur l'image. Ne les forcez pas, ils n'ont qu'une seule position correcte.

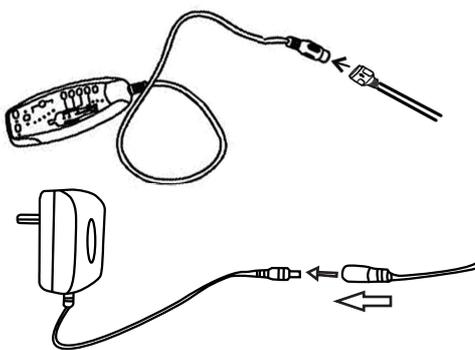

3) Les broches doivent être correctement connectées. Si le fauteuil commence à fonctionner alors que vous ne l'avez pas allumé et ne s'arrête pas, ce sera parce que les broches ont été connectées dans le mauvais sens. Si cela arrive, éteignez le fauteuil et connectez les broches correctement.

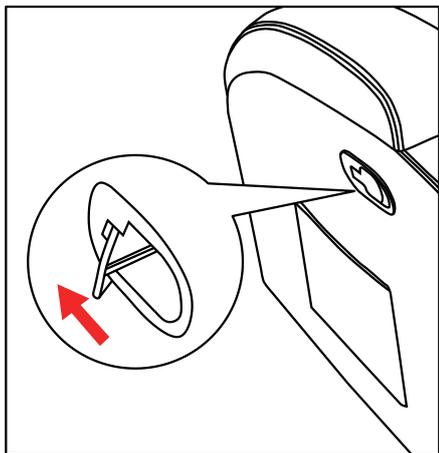

4) Appuyez sur la gâchette située à droite de la chaise pour que repose-pied s'étende, poussez le dossier avec le dos de façon continue jusqu'à ce qu'il atteigne son degré maximal. AVIS : LE DOSSIER NE PEUT PAS MAINTENIR SA POSITION LORSQU'IL EST INCLINÉ AU MAXIMUM SANS QU'UN POIDS NE SOIT EXERCÉ DESSUS.

Fonction de repos et fermeture du fauteuil inclinable

`Tirez sur la poignée en plastique pour ouvrir le fauteuil afin de l'incliner.

`Utilisez vos jambes et appuyez légèrement sur le repose-pied du fauteuil pour fermer le fauteuil.

CERTIFICATS:

RoHS

CE

SGS

EMC

LVD

Dépannage:

Si le fauteuil ne fonctionne pas, consultez le tableau suivant. Assurez-vous de bien éteindre et de débrancher le cordon d'alimentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ne démontez ni ne réparez aucune partie du fauteuil vous-même.

PROBLÈME

Il y a un bruit pendant le massage

La chaise de massage ne fonctionne pas lorsque le bouton de l'unité de contrôle est activé.

Difficile de remettre le repose-pieds

0033-1-84166106
contact@aosom.fr

CAUSE POSSIBLE

Le bruit est causé par le moteur du masseur, c'est normal.

Vérifiez que la fiche est bien enfoncée dans la prise murale. Vérifiez si le bouton d'activation est bien activé.

Ce problème est dû au ressort de support de repose-pieds haute résistance que nous utilisons pour une utilisation à long terme. Le repose-pieds sera plus facile à remettre après plusieurs utilisations.

