



INcwb027V01_US_UK_CA


712-029



IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

ASSEMBLY & INSTRUCTION MANUAL

PUSH FORWARD TO SECURE THE BREAK

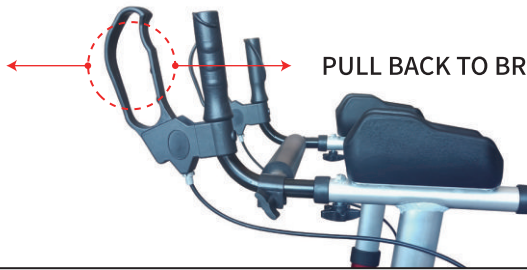

PULL BACK TO BREAK

BRAKE INSTRUCTIONS



WARNING

The brakes must be in the locked position before using the seat. Do not exceed the maximum weight capacity (including bag contents). Do not attempt to push the rollator while someone is sitting on the seat. Before each use make sure the rollator frame is fully opened and in a stable position. Check the brakes for proper operation. Make sure that all parts are secure and that moving parts are in good working order.



SPECIFICATION

Weight Capacity	300lbs
Seat Pad Height	20.5"
Seat Dimensions	10" x 18"
Front/Rear Wheels	7.5"


ADJUSTABLE HEIGHT

Size	Handlebars Height
Mini	37"
Max	42"

PART LIST



Main frame

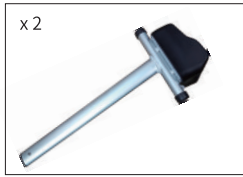

Handle



Backrest



Bag



Star screw




Star screw




Screw/nut


Step 1

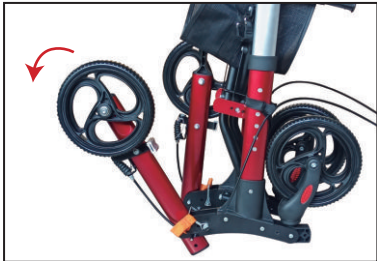

1. Unfold the rear leg.

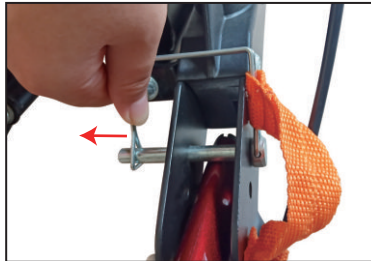


2. Take the clamps apart and take them out

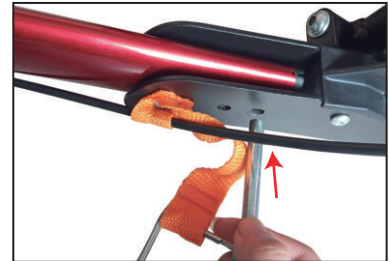


3. Insert plug into hole on outside of rollator frame.



4. Use the clip to buckle the other end of the plug.

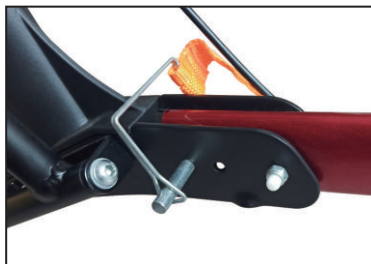

5. Installation is complete

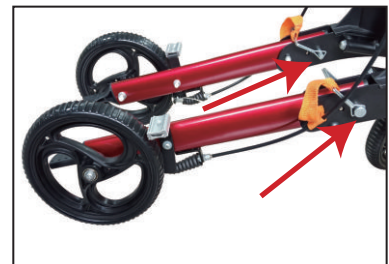


6. Congratulations on the first step of installation

Step 2



1. Unfold the front wheel.

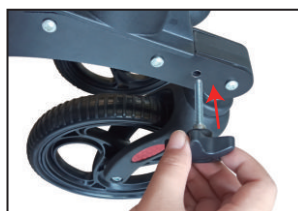

2. Insert the star screw "B" into the hole on the outside of the roller holder.




3. Tighten the star screw by hand until secure.



4. Congratulations on the second step of installation


Step 3

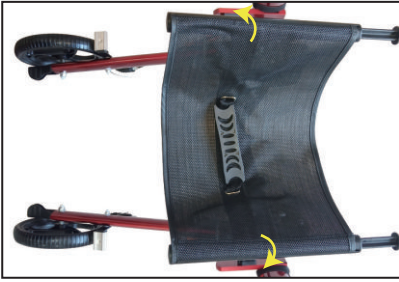

1. Hold both end of the seat and push down until the seat is completely flat.



2. Press the cushion down until the hook hooks in (under the seat)

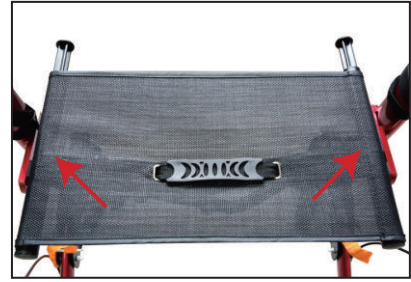

3. Congratulations on the third step of installation

Step 4




1. Insert the two height adjustable handles into the main frame (note that the brake lines correspond to the left and right)



2. Push button to adjust desired height.


Step 5

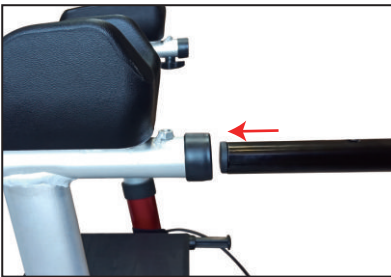


1. Insert hand grip into appropriate hole



2. Insert the star screw "A" into the hole from bottom up

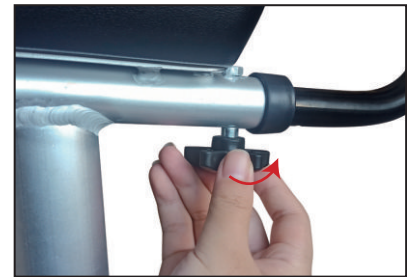


3. Tighten the star screw by hand until secure.

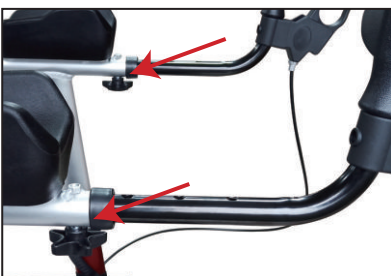


4. Congratulations on the fifth step of installation


Step 6

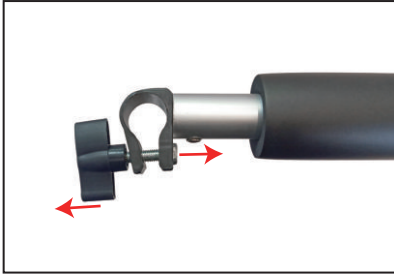


1. Remove the screw

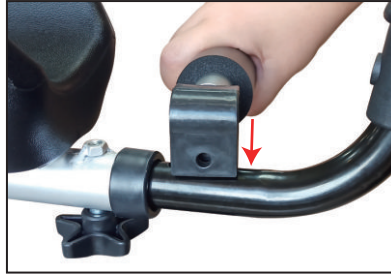


2. Insert backrest on the arm of the brakehandle

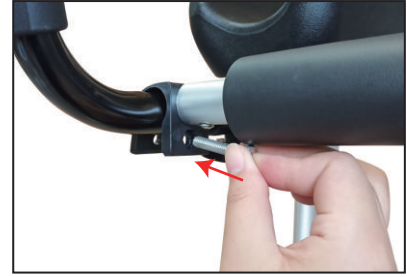

3. Insert the screws "C" from the inside

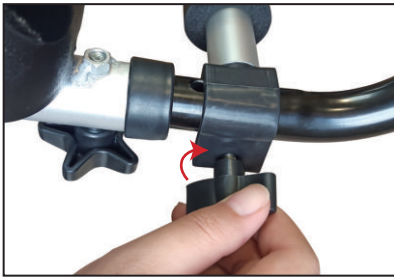

4. Tighten the nut by hand until secure.

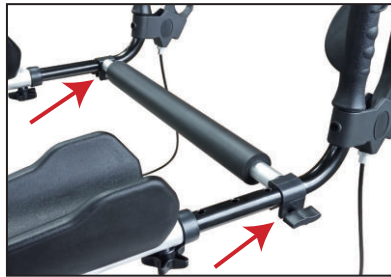

5. Congratulations on the Sixth step of installation

Step 7



1. After pushing the cart seat flat, take out the bag.



2. The two sides of the belt into the chair.

PULL IT UP, AND YOU CAN FOLD IT



When the brake resistance is not enough, loosen the screw to adjust the brake line

Poussez vers l'avant pour fixer le frein



Instructions du frein



AVERTISSEMENT

Les freins doivent être en position verrouillée avant d'utiliser le siège. Ne dépassez pas la capacité de poids maximale (y compris le contenu du sac) Ne tentez pas de pousser le déambulateur pendant que quelqu'un est assis sur le siège.

Avant chaque utilisation, veillez à ce que le cadre du déambulateur est complètement ouvert et dans une position stable. Vérifiez le bon fonctionnement des freins. Veillez à ce que toutes les pièces sont bien fixées et que les pièces mobiles sont en bon état de fonctionnement.



SPÉCIFICATIONS

Capacité de poids	300 lb
Hauteur du coussin d'assise	20.5"
Dimensions du siège	10" x 18"
Roues avant/arrière	7,5"


Hauteur réglable

Taille	Hauteur du guidon
Min	37"
Max	42"

LISTE DES PIÈCES



Cadre principal

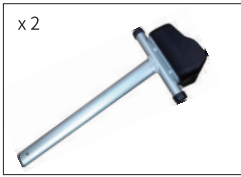

Poignée x2




Dossier




Sac



Vis en étoile (A) x2

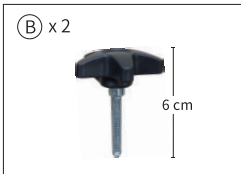


Vis en étoile (B) x2

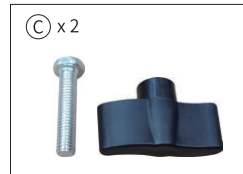


Vis/écrou (C) x2


Étape 1

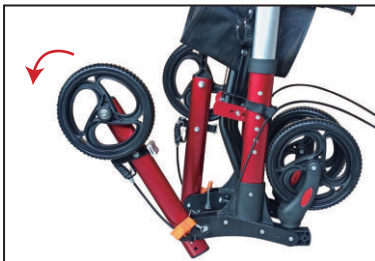

1. Dépliez le pied arrière.

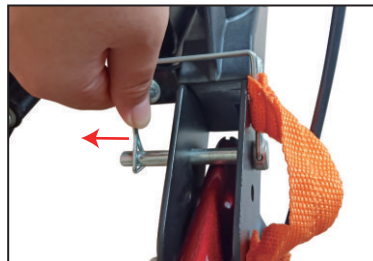


2. Démontez les pinces et retirez-les

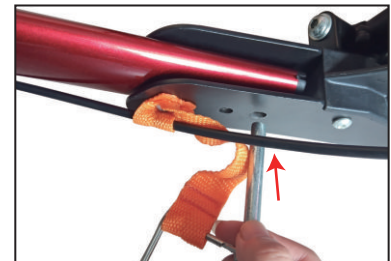


3. Insérez le bouchon dans le trou à l'extérieur du cadre du déambulateur.



4. Utilisez le clip pour boucler l'autre extrémité de la fiche.

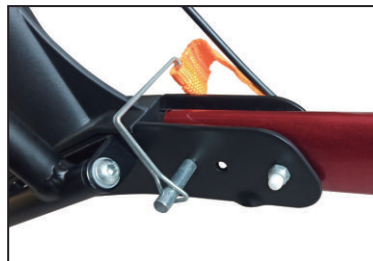

5. L'installation est terminée

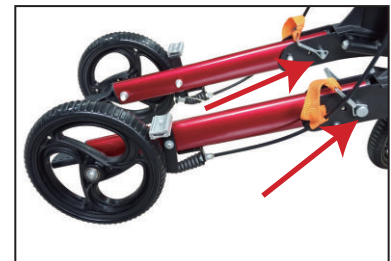


6. Félicitations pour la première étape de l'installation

Étape 2



1. Dépliez la roue avant

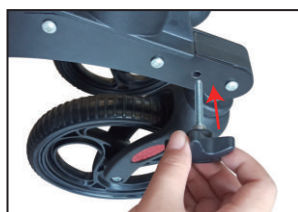

2. Insérez la vis en étoile « B » dans le trou à l'extérieur du porte-rouleau.





3. Serrez la vis en étoile à la main jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.



4. Félicitations pour la deuxième étape de l'installation.

Étape 3

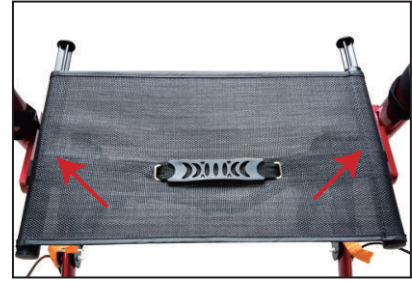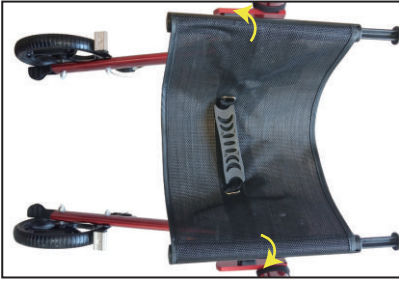

1. Tenez les deux extrémités du siège et poussez vers le bas jusqu'à ce que le siège soit complètement plat.

2. Appuyez sur le coussin vers le bas jusqu'à ce que le crochet s'accroche (sous le siège)

3. Félicitations pour la troisième étape de l'installation

Étape 4



1. Insérez les deux poignées réglables en hauteur dans le cadre principal (notez que les conduites de frein correspondent à la gauche et à la droite).

2. Appuyez sur le bouton pour régler la hauteur souhaitée.


Étape 5



1. Insérez la poignée dans le trou approprié


2. Insérez la vis en étoile « A » dans le trou de bas en haut

3. Serrez la vis en étoile à la main jusqu'à ce qu'elle soit bien fixée.

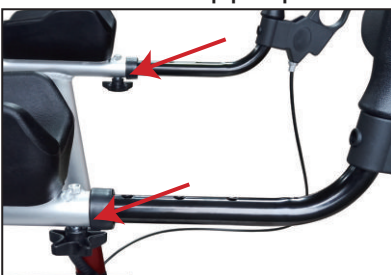


4. Félicitations pour la cinquième étape de l'installation

Étape 6

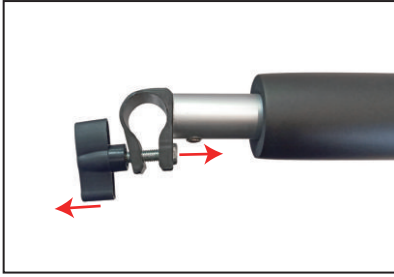


1. Retirez la vis

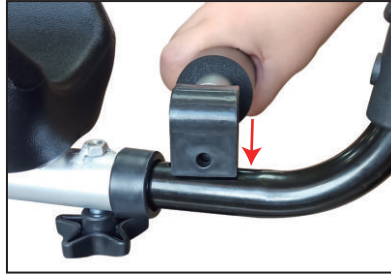


2. Insérez le dossier sur le bras de la poignée de frein



3. Insérez les vis « C » de l'intérieur

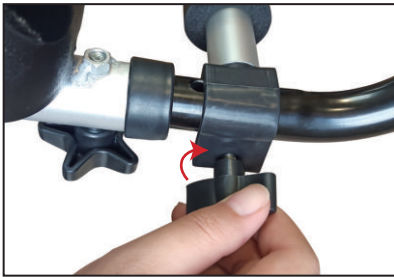

4. Serrez l'écrou à la main jusqu'à ce qu'il soit fixé.

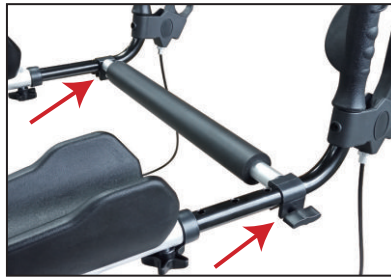

5. Félicitations pour la sixième étape d'installation

Étape 7




1. Après avoir poussé le siège de la chaise à plat, retirez le sac.



2. Les deux côtés de la ceinture dans la chaise

TIREZ-LE VERS LE HAUT ET VOUS POUVEZ LE PLIER

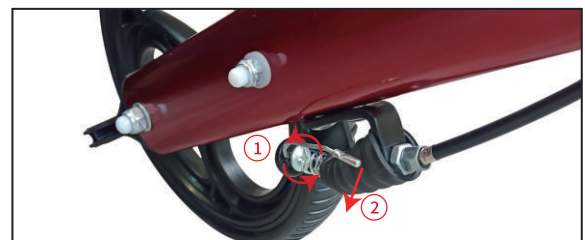

Lorsque la résistance du frein n'est pas suffisante, desserrez la vis pour ajuster la conduite de frein.